

# MANUAL DE INSTALACION PIT ECG MOBILE (Nivel Tecnico)



---

## ÍNDICE

---

1. INICIO DEL PROGRAMA .....	3
2. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS NECESARIOS.....	3
3. DIRECCION MAC ADDRESS DE LA TARJETA DE RED.....	3
4. PROBLEMAS FRECUENTES DE ACCESO A INTERNET .....	3
5. INSTALACION DE PROGRAMAS .....	6
5.1. SECCION 1 : INSTALANDO PIT MOBILE CLICK .....	6
5.2. SECCION 2 : INSTALANDO WINDOWS INSTALLER .....	8
5.3. SECCION 3 : INSTALANDO NET FRAMEWORK .....	9
5.4. SECCION 4 : INSTALANDO ADOBE READER .....	10
5.5. SECCION 5 : INSTALANDO MOZILLA FIREFOX .....	11
5.6. SECCION 6 : INSTALANDO DRIVERS ELECTROCARDIOGRAFO (CARDIETTE) .....	13
5.7. SECCION 7 : INSTALANDO DRIVERS CABLE USB .....	15
6. COPIAR CARPETA DE INSTALACION.....	16
7. COPIAR ARCHIVO <b>PAR.DAT</b> .....	17
8. VERIFICAR ESTADO DE CONEXIÓN .....	17
9. REVISAR GUIA RAPIDA PIT MOBILE (NIVEL USUARIO) .....	18

## 1.- INICIO DEL PROGRAMA

En nuestro CD de instalación encontraremos esta información, ejecutaremos *pitmobile.exe*. Este archivo contiene varios paquetes de instalación. Dentro del archivo ejecutable *pitmobile.exe* se encuentran los siguientes paquetes:

- Mozilla Firefox
- Windows Installer 3.1
- NetFramework 3.5,
- Drivers Cardiette (Electrocardiografo)
- Drivers Cable USB


## 2.- REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS NECESARIOS

- 1) PC con Windows XP. (no Windows Vista, no Windows 7)
- 2) Puerto Serial (COM1) Disponible o puerto USB Disponible.
- 3) Acceso a Internet.

## 3.- DIRECCION FISICA DE LA TARJETA DE RED (MAC ADDRESS).

Se requiere que Ud. envíe al email [info@itms.com.pe](mailto:info@itms.com.pe) la dirección física (Mac Address) de la Tarjeta de Red Ethernet y el nombre o razón social del establecimiento, para obtener la dirección física, ud debe ingresar a la ventana de comando de Windows XP (**cmd.exe**), y luego escribir el comando **ipconfig /all** (ver pantalla).

Ud después de realizar este paso recibirá un Archivo llamado **PAR.DAT**, y seguirá las Instrucciones cuando llegue a la **Página. 18** ( Capitulo 7: Copiar archivo PAR.DAT)

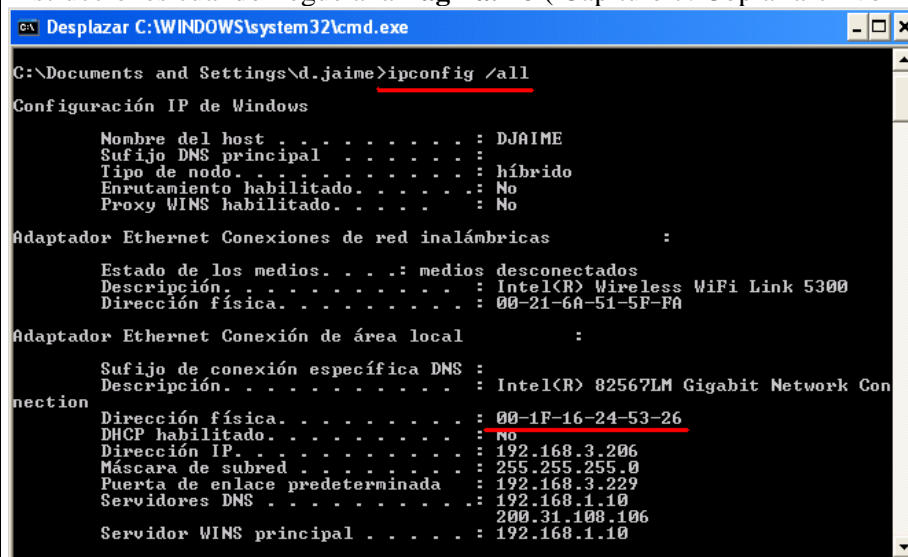

```

C:\Documents and Settings\d.jaime>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre del host . . . . . : DJAIME
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . : híbrido
Enrutamiento habilitado. . . . . : No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No

Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas :

Estado de los medios. . . . : medios desconectados
Descripción. . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 5300
Dirección física. . . . . : 00-21-6A-51-5F-FA

Adaptador Ethernet Conexión de área local :

Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . : Intel(R) 82567LM Gigabit Network Con
nection
Dirección física. . . . . : 00-1F-16-24-53-26
DHCP habilitado. . . . . : no
Dirección IP. . . . . : 192.168.3.206
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.3.229
Servidores DNS . . . . . : 192.168.1.10
                          200.31.100.106
Servidor WINS principal . . . . : 192.168.1.10
  
```

**Nota:** en caso vuestra PC tenga 2 tarjetas de Red (Ethernet y Inalámbrica) Ud. debe proporcionar ambas direcciones físicas.

#### **4.- PROBLEMAS FRECUENTES DE ACCESO A INTERNET**

**a) En caso vuestra Red tenga Proxy:**

En el Proxy (Software ò Hardware), permitir el acceso a las siguientes direcciones [www.pitperu.com.pe](http://www.pitperu.com.pe) (puerto 80) y a la IP 190.187.67.198 (puerto 80). Esta IP pertenece al Centro Telemedico de la empresa ITMS.


**b) En caso vuestra Red tenga Firewall**

En el Firewall (Software ò Hardware), Permitir el acceso (crear una Regla) que permita el acceso de “*entrada – Salida*” de datos de la siguientes direcciones [www.pitperu.com.pe](http://www.pitperu.com.pe) y a la IP 190.187.67.198 .Esta IP pertenece al Centro Telemedico de la empresa ITMS.

**c) En caso vuestra Red no tenga Proxy ni Firewall**


Asegurarse que su **antivirus personal** instalado en la PC, donde se instalara PIT MOBILE, tampoco este bloqueando las direcciones arriba mencionadas. En caso **el Firewall de Windows XP** este Activo, debe agregar una “**excepción**” dentro de la configuración, para que el ***pitmobileserial.exe*** no tenga inconvenientes en la transmisión del ECG, de acuerdo como lo muestra la siguiente pantalla.


Click en “**Agregar Programa**”

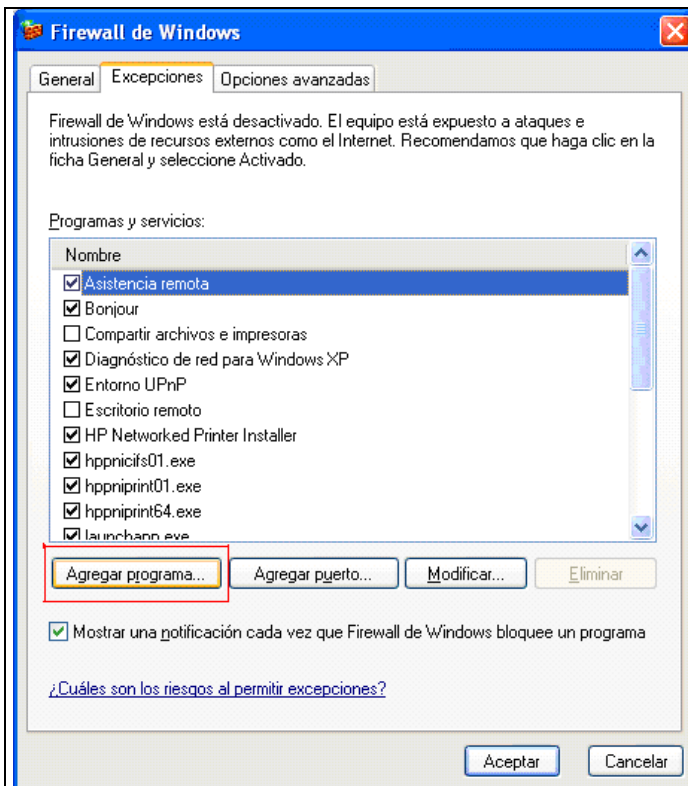

Luego Click en “Examinar”, e ir a la siguiente Ruta : C:\Archivos de programa\PIT Mobile Click\PitMobileSerial3.2\PitMobileSerial.exe

**Nota:** esta ruta aparecerá después de realizar el **PASO 5 (COPIAR CARPETA DE INSTALACION)**, indicado en el Presente Manual.

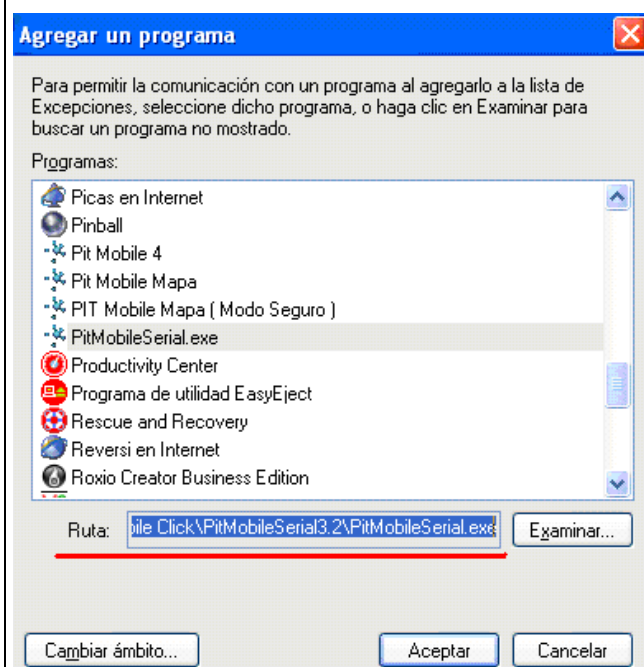


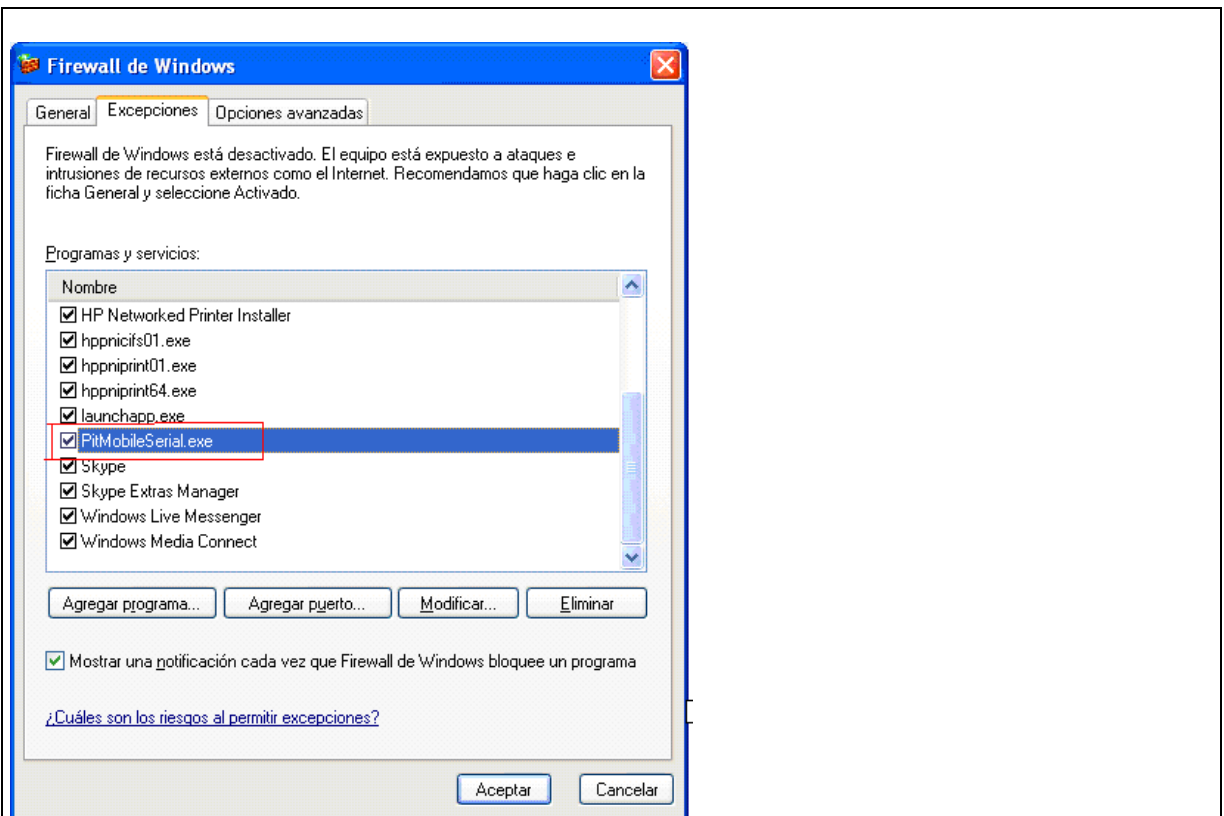


## 5.- INSTALACION DE PROGRAMAS

### SECCION 1: INSTALANDO PIT MOBILE

Los Programas se instalaran de Forma Consecutiva, Dar Click al icono ***pitmobile.exe*** que se encuentra ubicado en el CD de Instalación. Aparecerá la pantalla de bienvenida, damos click en “NEXT”.

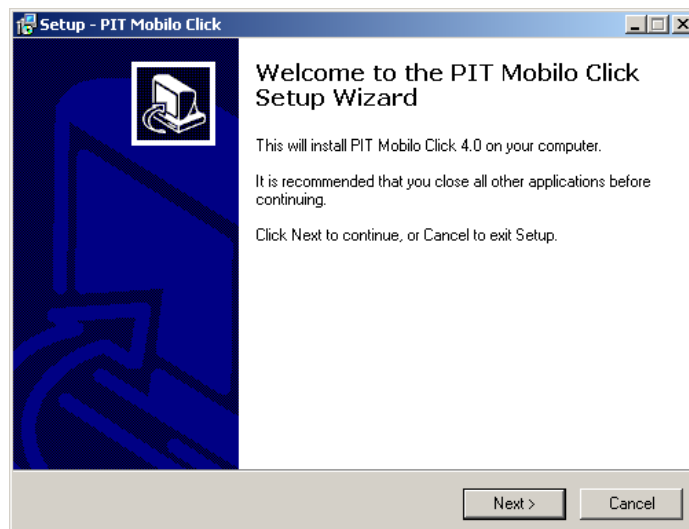

Dejaremos por defecto dejar la ruta de instalación, damos click en “**NEXT**”. Luego en la siguiente ventana el nombre de la carpeta también lo dejaremos por defecto (ITMS Mobile).Damos click en “**NEXT**”, y luego click “**INSTALL**”

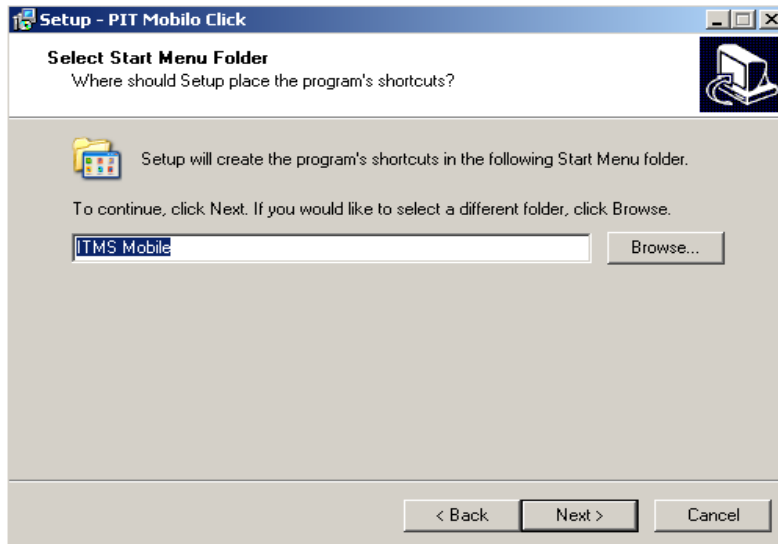


..... Comenzara a instalarse el aplicativo.....

**Nota:** En el momento de instalarse el aplicativo PIT MOBILE, el software instalador comenzara a instalarse paralelamente los otros aplicativos como el Adobe Reader, los drivers del equipo Cardiette (Electrocardiógrafo), el Mozilla Firefox, etc.




**Nota:**

- a) Si vuestra PC contara con Adobe Reader, nos mostrara este mensaje, dar **OK** para que el sistema continúe con su proceso.....
- b) Si vuestra PC ya cuenta con alguno de estos podemos dar cancelar al paquete de instalación.

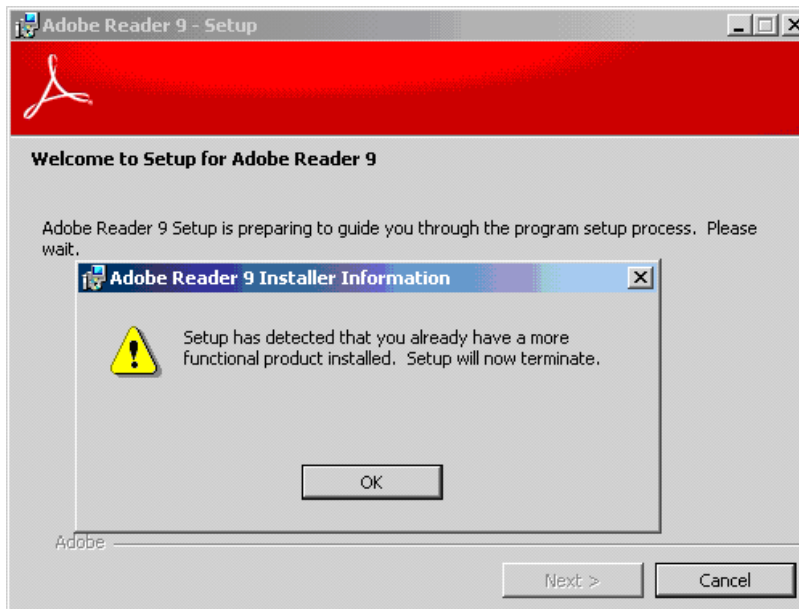


**SECCION 2: INSTALANDO WINDOWS INSTALLER**

**Nota:** Es necesario no obviar este paso de la instalación (ver ventana siguiente), el paquete de instalación (*pitmobile.exe*) comenzara a descargar el Windows Installer para proceder a actualizar o instalar el NetFramework, **es necesario contar con Internet en este momento.**

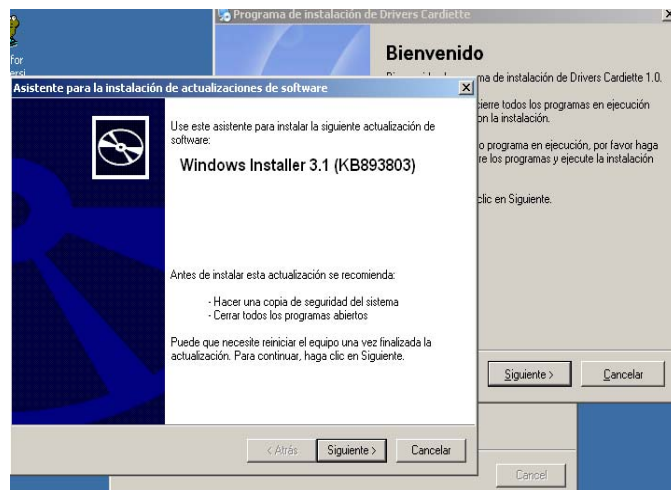





.....Aceptamos el contrato de licencia.....

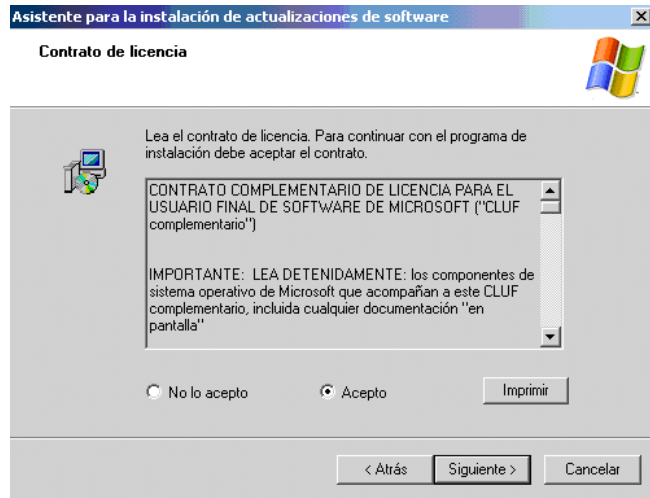

**Nota:** Este es un aviso que detendrá algunos servicios de Windows, le damos click en “CONTINUAR”.

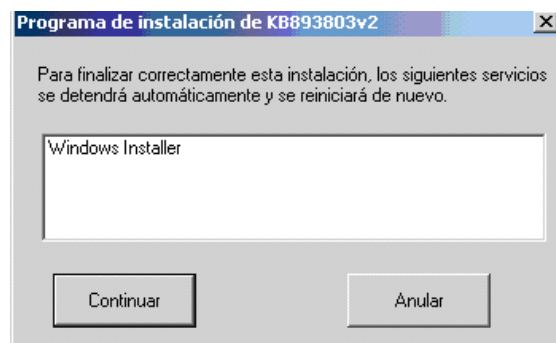

Al momento de finalizar el asistente, nos mostrara este mensaje, damos click en “Finalizar”....

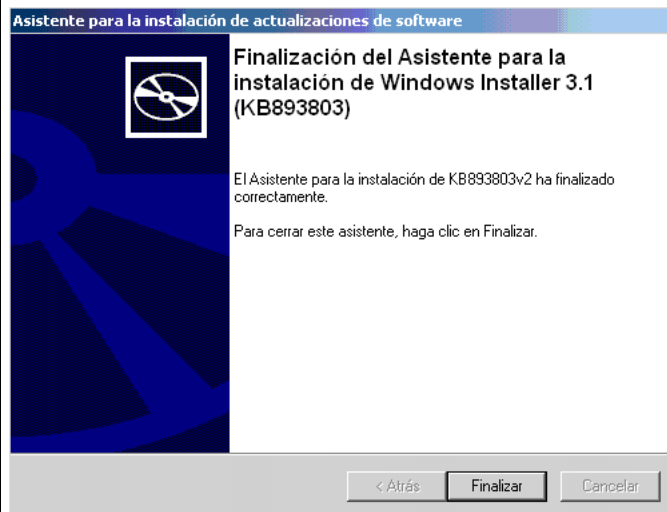


*El paquete de instalación comenzara a desempaquetar los archivos requeridos.....*

### **SECCION 3: INSTALANDO NET FRAMEWORK**


Aceptaremos los términos para poder proseguir con la instalación dando click en “INSTALAR”.

**Nota:** Es necesario contar con acceso a Internet en esta parte de la instalación ya que este paquete de instalación realiza consultas de actualización a páginas Web de Microsoft.

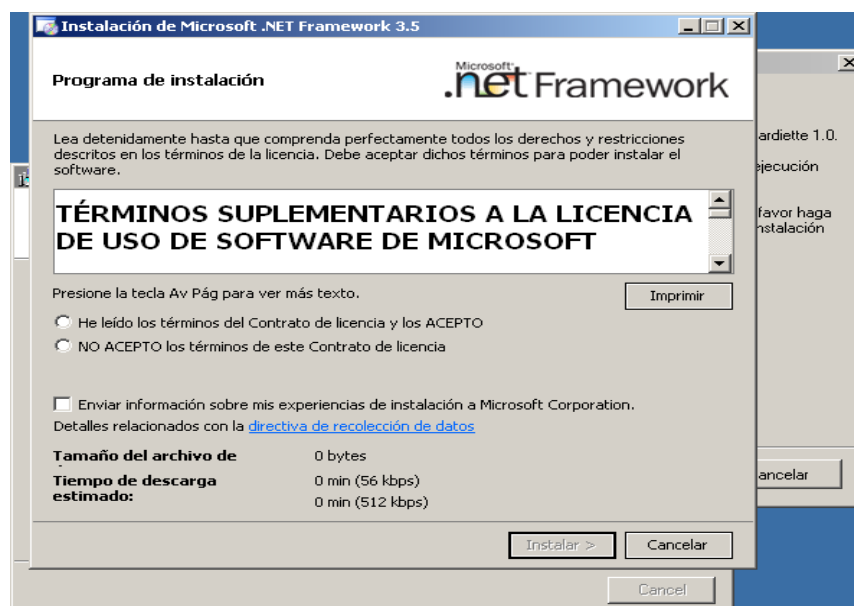


#### **SECCION 4: INSTALANDO ADOBE READER**

Si nuestra PC no contara con Adobe, proseguimos con la ventana de este aplicativo, damos click en “NEXT”.

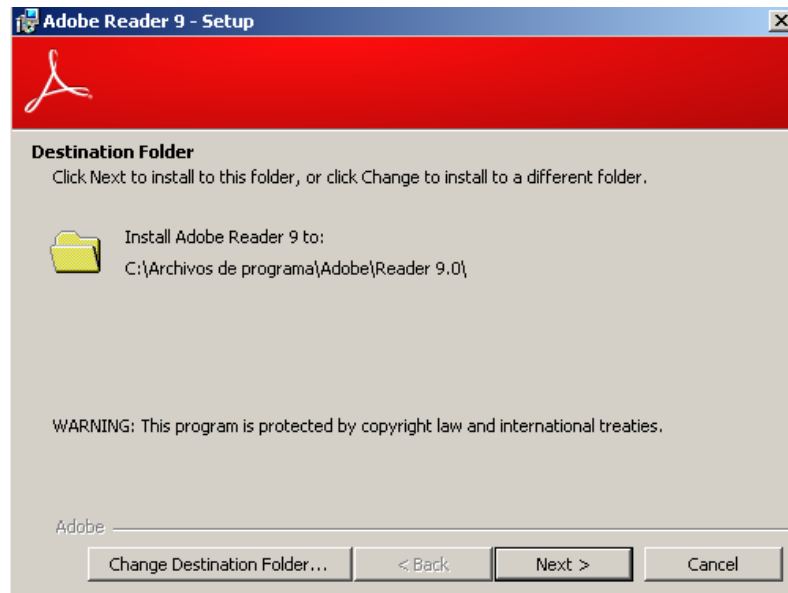

La siguiente ventana dar click en “INSTALL”, y luego “FINISH”

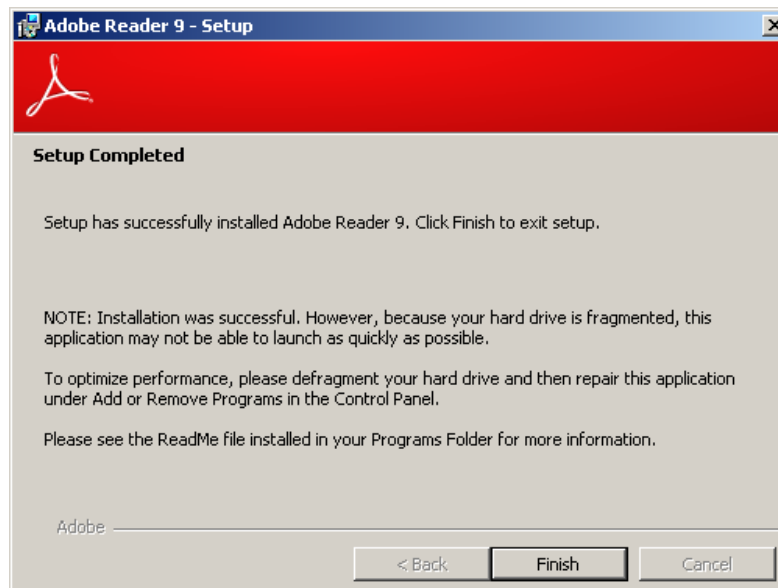

## **SECCION 5: INSTALANDO MOZILLA FIREFOX**


Si nuestra PC no cuenta con el navegador Mozilla Firefox, buscaremos esta ventana para poder proceder a la instalación del navegador, activamos la casilla **“Acepto los términos de acuerdo de licencia”**, y damos click en **“SIGUIENTE”**.




Damos click en **“SIGUIENTE”**, y en la siguiente Ventana click en **“INSTALAR”**. Al terminar la instalación mostrara esta ventana en donde daremos click en **“FINALIZAR”** y quitaremos el check de la casilla de verificación **“Ejecutar Firefox ahora”**.




**Nota:** Posiblemente este mensaje aparezca en el transcurso de la instalación después de haber culminado de instalar algún paquete, deberemos de dar **“NO”** para proseguir con el resto de la instalación.

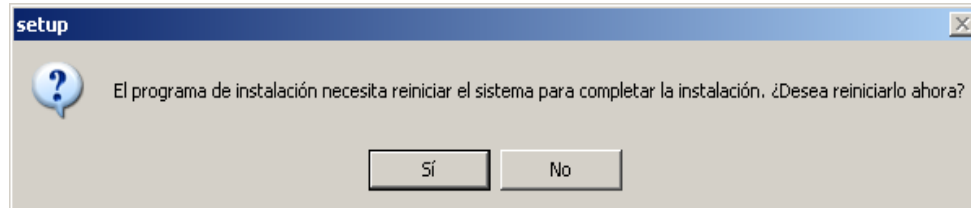

**Nota:** Es probable que salga este mensaje, si el instalador no puede registrar el archivo OCX que menciona.....

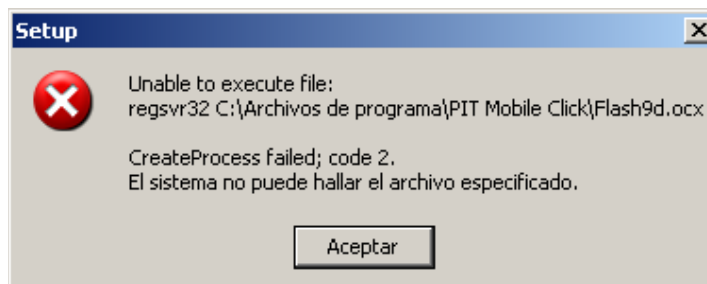


.... Debemos realizarlo manualmente en una línea de comando con **“REGSVR32”** registrándola en **“C:\windows\system32”**. El archivo flash9d.ocx se encuentra ubicado en **“C:\Archivos de programa\PIT Mobile Click”**.

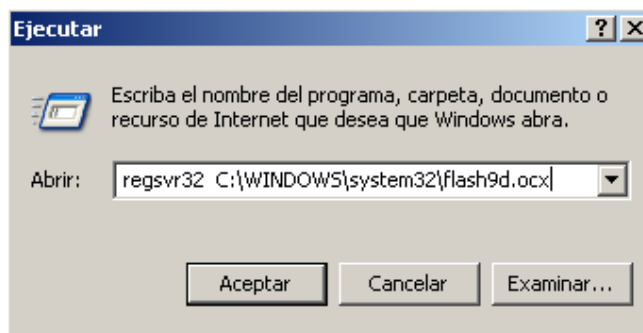

**SECCION 6: INSTALANDO DRIVERS ELECTROCARDIOGRAFO (CARDIETTE)**


El Software instalador procederá, a realizar la instalación de los drivers del electrocardiógrafo, damos click en “**SIGUIENTE**”.

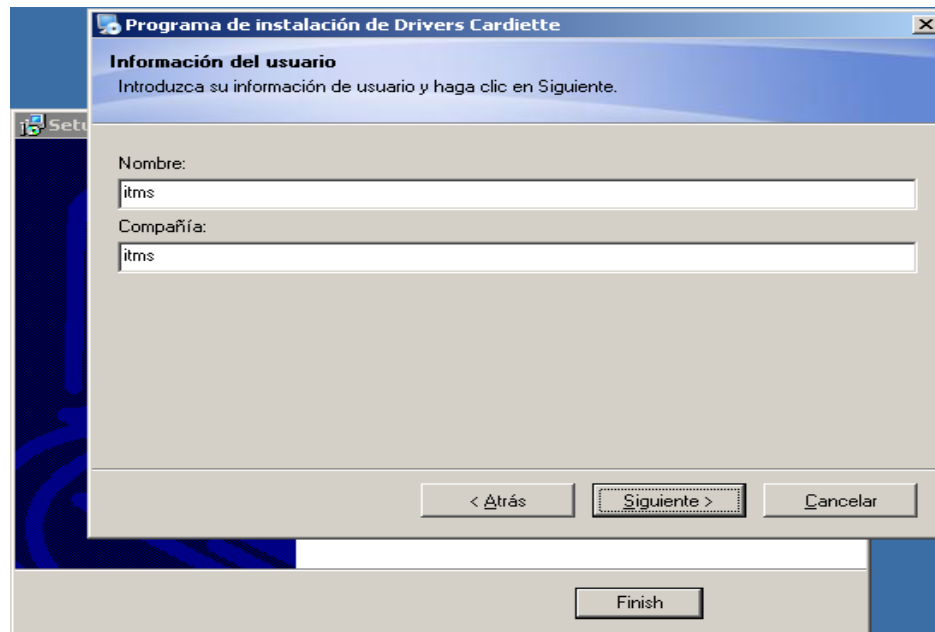


Dejamos la ruta de instalación por defecto, damos click en “**SIGUIENTE**”, y la ventana que continúa también debemos dar Click en “**SIGUIENTE**”.

*.....El asistente comenzara a instalar los drivers.....*

Una vez terminado, damos click en “**TERMINAR**”. Al finalizar todos los paquetes aparecerá esta ventana, confirmando la culminación de la instalación del aplicativo con todos sus componentes, damos click en “**FINISH**”.

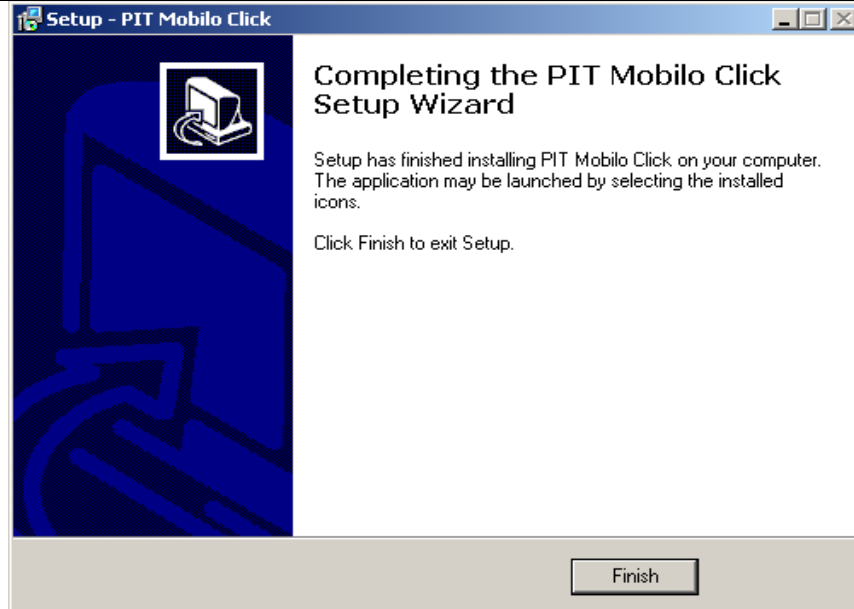


**Nota:** Es probable que salga esta ventana con este tipo de mensajes en el transcurso de la instalación de todos los programas, solo se dará click en **SI** cuando se halla instalado todos los programas.

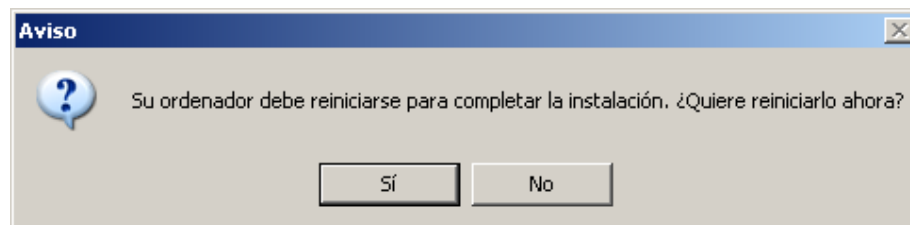


**Luego debemos reiniciar la PC.**

## **SECCION 7: INSTALANDO DRIVERS DEL CABLE USB**

Después de reiniciar su PC, procedemos a instalar los drivers del cable (si Ud. cuenta con su propio conector USB/SERIAL instale sus propios drivers), los instaladores se encuentran en el CD de Instalación que le suministramos en la carpeta **“driver USB”**. Damos click en **“NEXT”**, luego en la siguiente ventana también dar click **“NEXT”**.

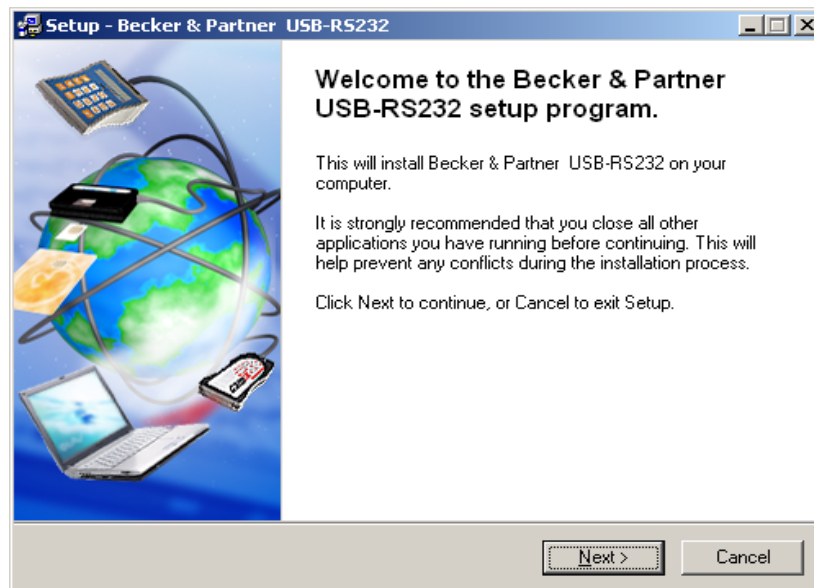


La PC procesara la información por unos minutos y aparecerá esta pantalla el cual muestra la culminación de la instalación de los drivers, daremos click en **“FINISH”**.

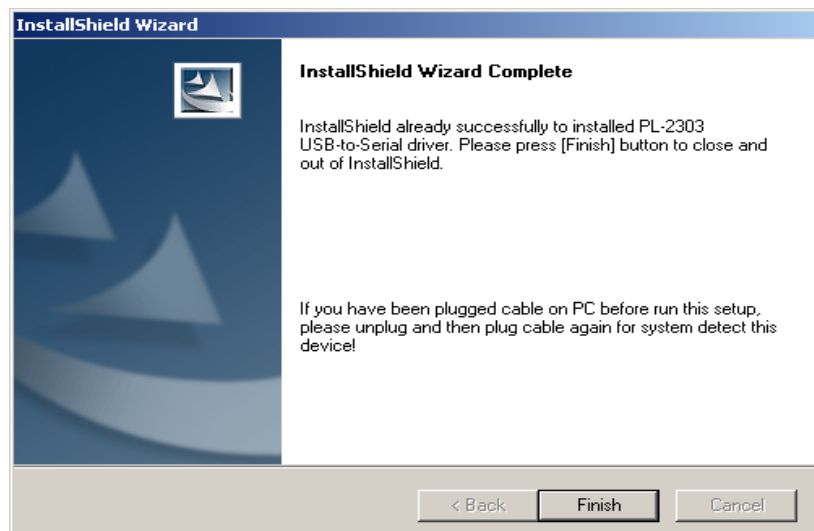




## 6.- COPIAR CARPETA DE INSTALACION

Después de haber instalado el aplicativo con sus componentes y los drivers del cable USB, procederemos en copiar la carpeta (dicha carpeta también contiene archivos) “**PitMobileSerial3.2**” que se encuentra en nuestro CD de Instalación.

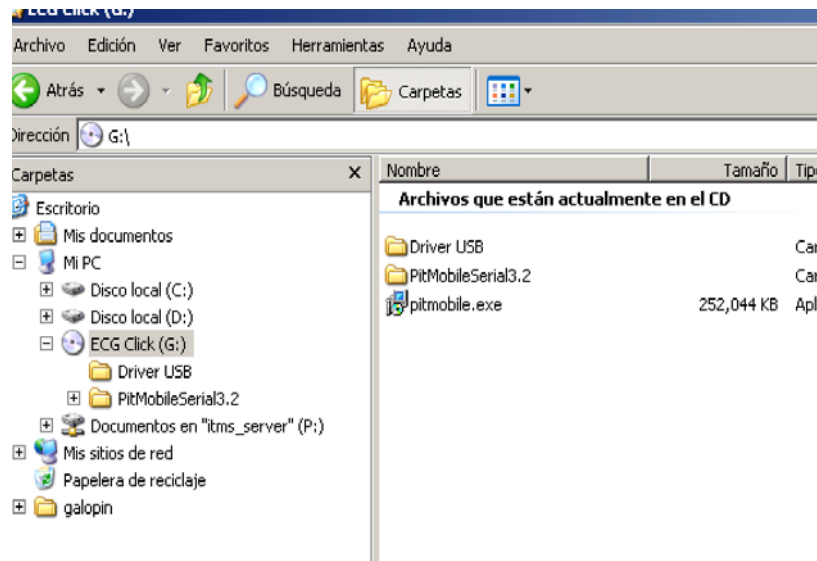

La Carpeta “**PitMobileSerial3.2**”, debe copiarse manualmente en la siguiente ruta: “**C:\Archivos de programa\PIT Mobile Click\**”. (En caso el sistema Operativo este en Ingles debe copiarse la ruta siguiente “**C:\Programs files\PIT Mobile Click\**”)

Ahora la carpeta debería de quedar así.

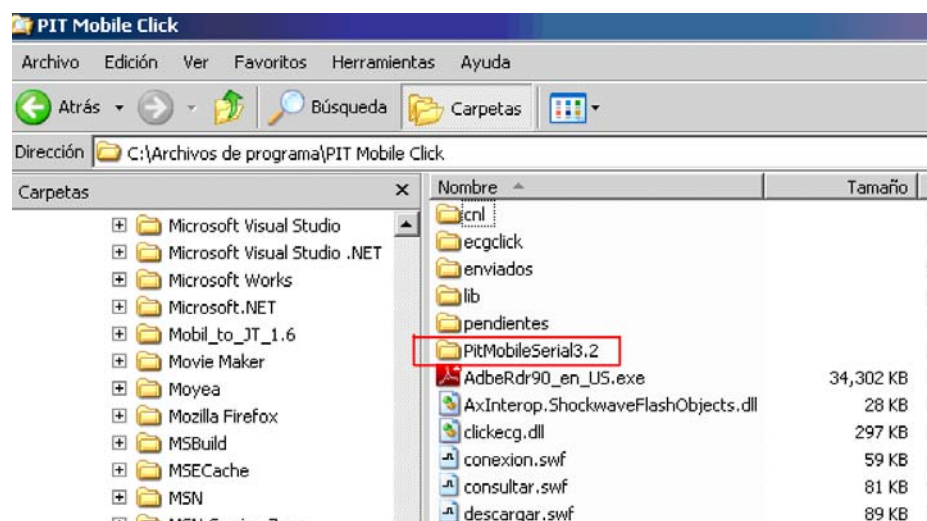


**Nota:** es probable que no estén algunas carpetas como lo muestra el siguiente grafico: no

se preocupe !! , que el programa mismo las creara al momento de su primera ejecución.

## **7.- COPIAR ARCHIVO PAR.DAT**

Cuando llegue a este punto, Ud. debe copiar el Archivo **PAR.DAT**, que le deben de haber enviado según la Pagina 3 (Capítulo 3: Dirección física de la tarjeta de Red) .Este archivo será copiado en la Ruta Siguiente: “C:\Archivos de programa\PIT Mobile Click\PitMobileSerial3.2\”.

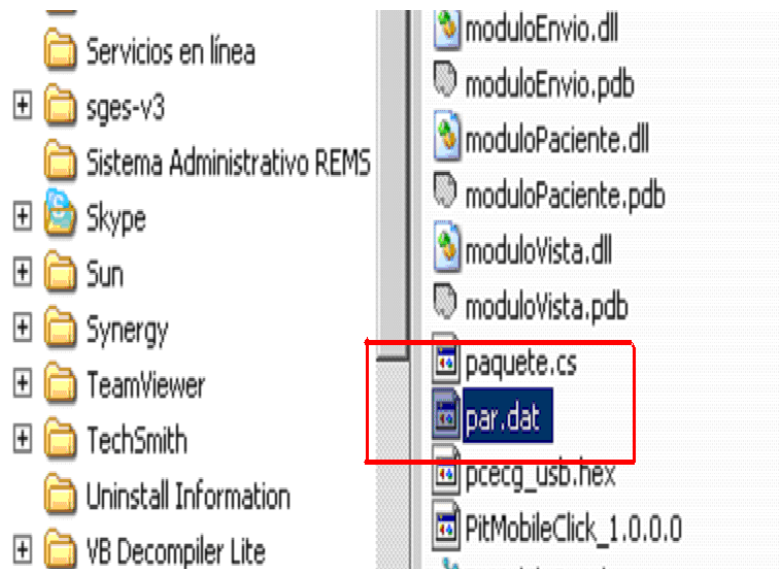


## **8.- VERIFICAR ESTADO DE CONEXION**

Asegúrese que el icono **pitmobileserial.exe** se encuentre dentro de la ruta “C:\Archivos de programa\PIT Mobile Click\PitMobileSerial3.2”, dar Click al archivo **PitMobileSerial.exe** Ejecute el programa y deberá de aparecer la siguiente ventana.



Fíjese en el **estado de conexión**, deberá de aparecer: **Conexión OK**, y en **MAC**, deberá de aparecer el dato que envió a la cuenta email [info@itms.com.pe](mailto:info@itms.com.pe) .

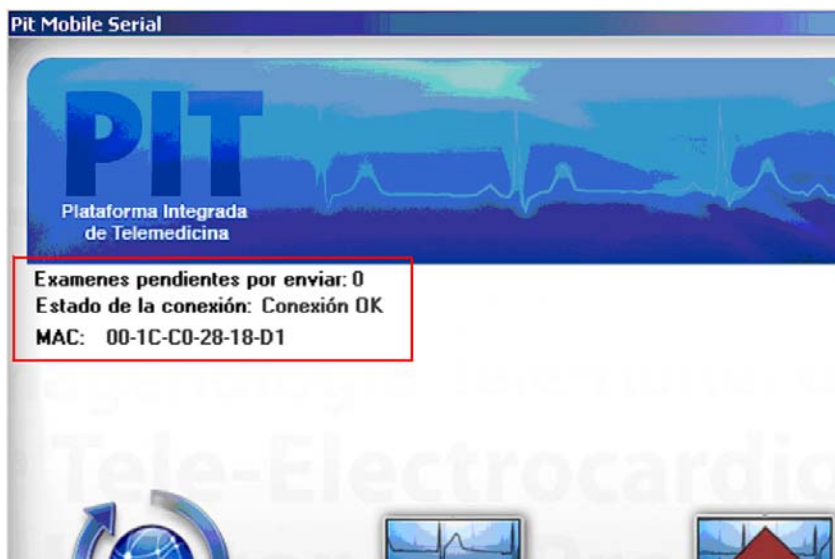

## **9.- REVISAR GUIA RAPIDA PIT MOBILE (NIVEL USUARIO)**

Recomendamos entregarle al usuario del sistema PITMOBILE el Manual de guía rápida, solicitarlo a la cuenta email [info@itms.com.pe](mailto:info@itms.com.pe) o descargarlo de nuestra pagina Web [www.itms.com.pe](http://www.itms.com.pe)

**Muchas gracias por su Atención.**

**ITMS PERU SA**  
**TELF. 7086600 FAX. 7086660**  
**AV. JOSE PARDO 1194 – INT. MEZZANINE - MIRAFLORES.**  
**WWW.ITMS.COM.PE**